



Te ayudamos a colocarlo correctamente



1. Ajusta el arnés para la cabeza, según sea necesario, para que quede cómodo una vez colocado. Coloca el respirador sobre tu boca y nariz, luego coloca el arnés para la cabeza sobre la coronilla.



2. Sujeta las correas, colócalas en la parte trasera del cuello y engánchalas entre sí.



3. Tira de los extremos de las correas del arnés para la cabeza para ajustarlas.



4. Tira de los extremos de las correas para el cuello para ajustarlas. La tensión de la correa para el cuello puede disminuir si elevas el seguro de las hebillas. Las correas deben sentirse tensas pero no demasiado ajustadas.



5. La tensión de la correa del arnés de la cabeza puede reducirse presionando los seguros laterales de las hebillas del arnés. Las correas deben sentirse tensas pero no demasiado ajustadas.

Realizar una verificación de sellado del usuario

(Se puede usar con filtros de partículas o cartuchos)



Prueba de sellado con presión positiva:

Cubre la abertura de la válvula de exhalación con la mano y exhala suavemente. Si la pieza facial se hincha levemente y no se detectan fugas entre el rostro y la pieza facial, el sello es correcto.



Prueba de sellado con presión negativa:

Presiona ligeramente el botón de verificación de sellado hasta sentir resistencia. Mantén el botón en esta posición e inhala suavemente. Si sientes que la pieza facial se succiona ligeramente acercándose a tu cara sin fugas entre la cara y la pieza facial, obtuviste un sello adecuado.




Si se detecta una fuga de aire en el sello, vuelve a colocar el respirador o ajusta de nuevo la tensión de las correas para eliminar la fuga de aire. Repite la verificación de sello del usuario hasta obtener un sello adecuado.

Ajustes del arnés para la cabeza

El arnés para la cabeza está diseñado para acomodar cascos y lentes de seguridad en diferentes rostros. Ajusta el arnés para la cabeza de modo de colocar la hebilla azul en una posición más alta o más baja, como se indica a continuación.



Haz que el arnés para la cabeza sea más grande moviendo las trabas del arnés a una posición más ancha. Esto debe hacer bajar la hebilla azul por debajo de la patilla de los lentes.

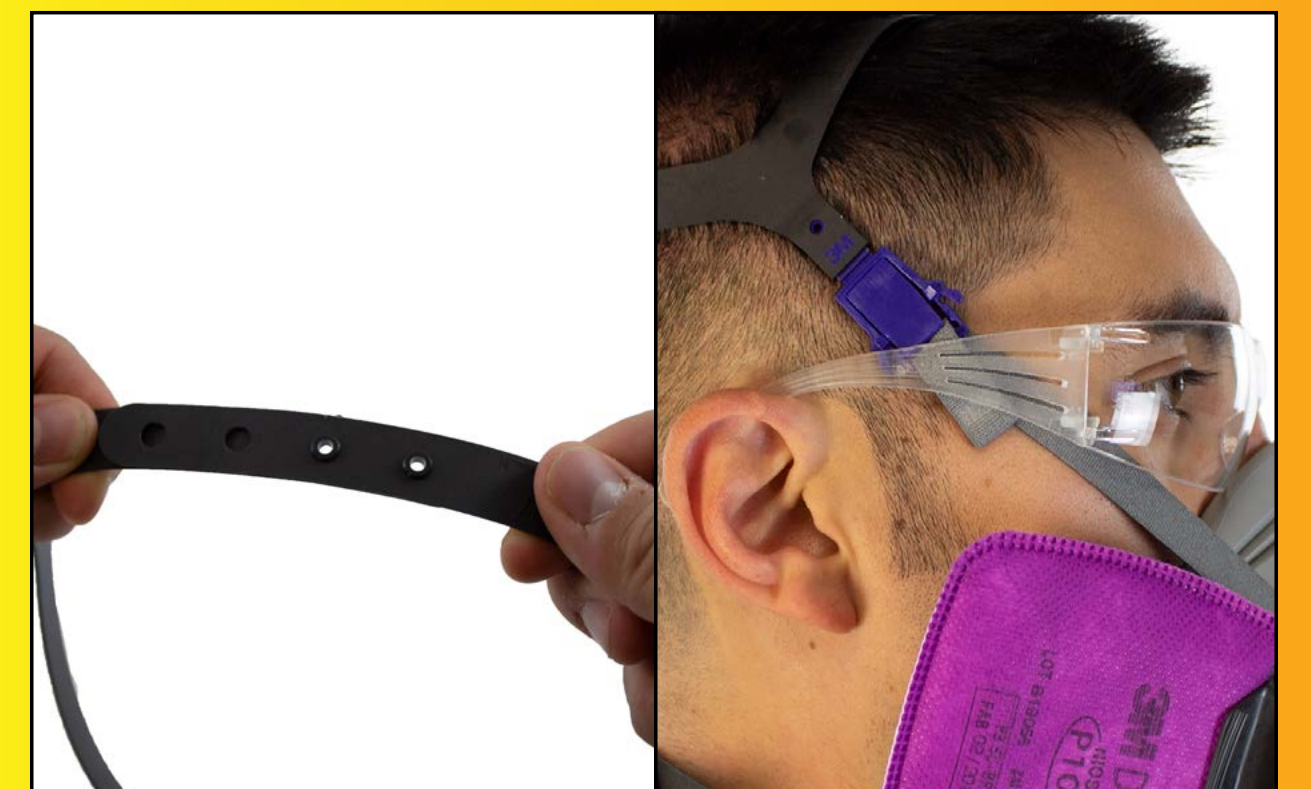

Haga que el arnés para la cabeza sea más pequeño moviendo las trabas del arnés a una posición más estrecha. Esto debe elevar la hebilla azul a una posición más alta sobre la patilla de los lentes.



⚠ ADVERTENCIA

Estos respiradores sirven como protección contra ciertos contaminantes suspendidos en el aire. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones de uso que se incluyen junto al empaque del producto. Se debe implementar un programa de protección respiratoria por escrito que reúna los requisitos de ASHA 1910.134, incluidas la capacitación, la prueba de ajuste y la evaluación médica. En Canadá, se debe cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.4 o los requisitos legales aplicables, según corresponda. El uso incorrecto puede causar enfermedad o muerte. Para el uso correcto, consulte a su supervisor y las Instrucciones de uso, o llame al Servicio Técnico de 3M PSD en EE. UU. al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414.